



● 통합 Diluter T-Piece Set (**Cat No. 33101**)


대석메드 T-Piece Set 응용법 (제품번호: 33101)

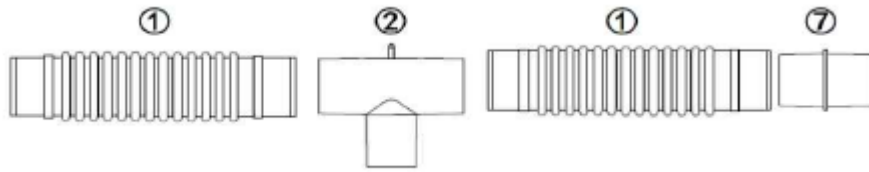

Circuit Tubing으로만 단순히 산소투여하는 경우

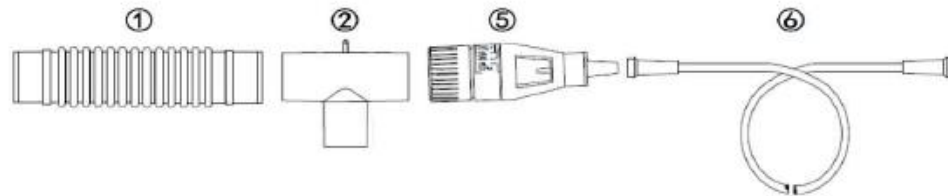

산소라인으로 산소농도 조절을 해가며 산소를 투여하는 경우

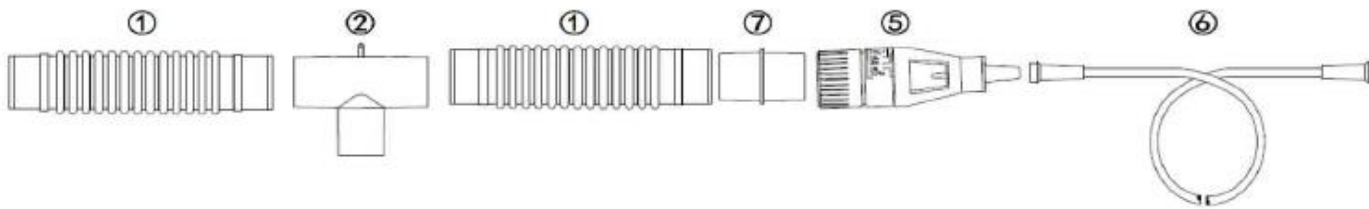


Tubing 길이 연장을 하면서도 산소라인으로 산소투여를 하는 경우

T-Piece O2 Adaptor Set

1) T-Piece Set (O2 Adaptor 22mm)




2) T-Piece Set (O2 19mm)

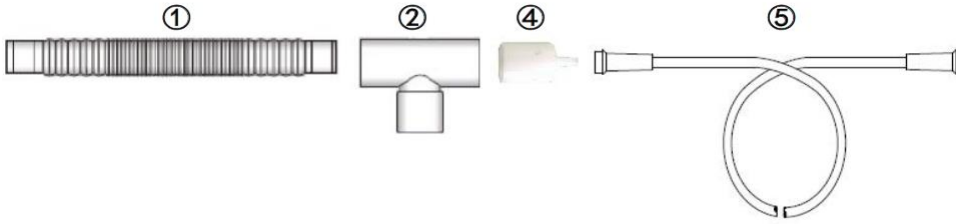



모델명	Product Description
DSMD 2001	T-Piece+15cm Tube x 2+O2 Adaptor 22mm+ O2 Line
DSMD 2002	T-Piece+15cm Tube x 2+O2 Adaptor 22mm
DSMD 2004	T-Piece+15cm Tube x 2
DSMD 2003	O2 Adaptor 22mm
DSMD 2006	O2 Adaptor 19mm

O2 Adaptor Size	Specification	Length
Standard	15 I.D x 22 O.D	3cm
Small	15 I.D x 19 O.D	2.5cm

O2 adapter 와 Diluter 의 차이

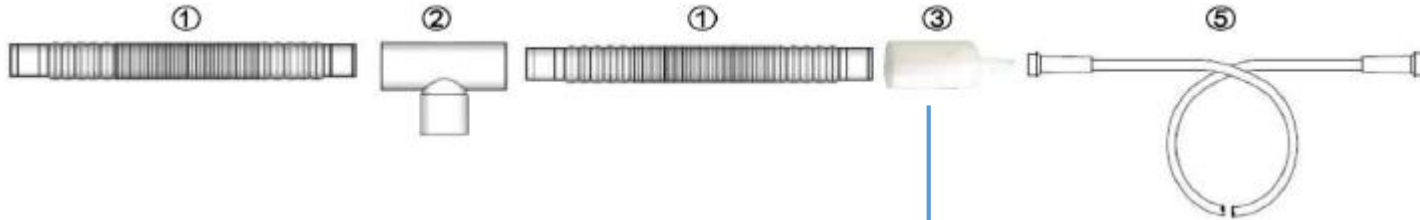

일반적인 O2 adapter:
산소농도 조절이 불가능함.

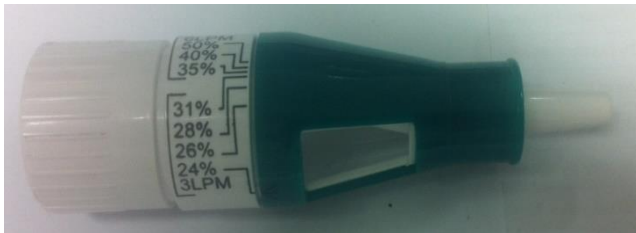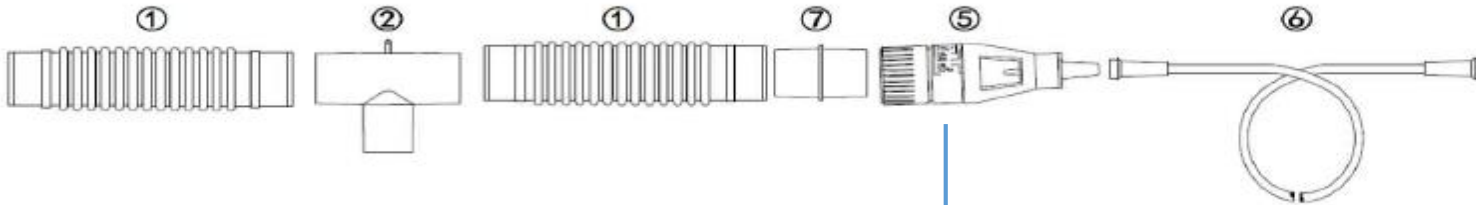

Adjustable Diluter

FiO2 산소농도를 24% ~ 50%
까지 조절 가능.

DSMD2001





